

SPITALUL ORĂȘENESC BUHUȘI

Oras Buhuși, str. Văioagă nr.3, jud. Bacău. A.S.F. nr. 925 din 19. 04. 2017. C.I.F. 4187271. Cod postal 605100.
Accreditat A.N.M.C.S.. ORDIN 235/ 30.12.2015. Operator de date Nr.notificare. 17475

Tel: 0234-262220 – centrala. Tel/Fax: 0234-261560 – secretariat;

e-mail: spitalbuhusi@gmail.com. site: www.spitalbuhusi.ro



I.S.O. 9001/ studii clinice
N.C. 56336/A/001/UK/Ro



I.S.O. 22000
N.C. 56336/A/0002/UK/Ro



O.H.S.A.S. 18001
N.C. 56336/B/0001/UK/Ro



O.H.S.A.S. 18001
N.C. 56336/B/0001/UK/Ro



O.H.S.A.S. 18001
N.C. 56336/B/0001/UK/Ro

Spitalul
Orășenesc
Buhuși

Nr. 11028 din 13.11.2017



Nr. 11028 din 13.11.2017

Avertisment! Acest document conține informații și date care sunt proprietatea Spitalului Orasenesc Buhuși.
Reproducerea și difuzarea sunt în exclusivitate dreptul spitalului.

PROCEDURA PRIVIND VERIFICAREA SI AMBALAREA TRUSELOR CU INSTRUMENTAR SI MATERIAL MOALE CARE VOR FI STERILIZATE

PROCEDURA	Operationala	x	De sistem	
COD STRUCTURĂ ST.				
NUMĂR PROCEDURA 04				
DOMENIUL DE ACTIVITATE REGLEMENTAT	Medico-chirurgicale		Nemedical	x
COD PROCEDURĂ PO.ST.04.N				
EXEMPLARUL nr.				

Elaborat. As. Med . MARES Mariana	Data. 10.11.2017	Semnatura.
Verificat. Dir. Medical. ROTARU Hilda.	Data. 13.11.2017	Semnatura.
Verificat pentru conformitate reprezentant birou calitate.	Data. 13.11.2017	Semnatura.
Aprobat. Manager. Dr. TORON Mouhannad.	Data. 13.11.2017	Semnatura.
Diseminare. Catre personalul medical din compartimentul Sterilizare , CPIAAM .		
Aplicare De catre personalul medical din compartimentul Sterilizare, CPIAAM		


Editia/ Revizia	Componenta revizuită	Descrierea modificarii	Data de la care se aplică prevederile ediției / reviziei
Ediția I	x		16.11.2017
Revizia 1			
Revizia 2			
Revizia 3			

Revizia acestei proceduri se face tinand cont de rezultatele implementarii, indicatorilor de monitorizare de structura, de proces, rezultatelor obtinute, modificari legislative, modificari de circuite, reorganizari interne, etc.

Revizia nu este obligatorie decat daca se indeplinesc cel puțin unul dintre criteriile sus mentionate.

Scop :

Scopul acestei proceduri este de a verifica efectuarea corecta a presterilizarii truselor.

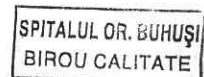

Definiții .

Sterilizarea este o operație tehnologică prin care sunt distruse microorganismele . Toate dispozitivele medicale și materialele care urmează a fi sterilizate trebuie curățate prin metode fizice și dezinfectate înainte de a fi supuse unui proces de sterilizare standardizat.

Documente de referință.

Ordinul MS 961 / 2016 ,Norme tehnice privind curățarea , dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare .

Descrierea procedurii

Toate trusele aduse pentru sterilizare vor fi verificate . Acest lucru:

- diminuează populația de microorganisme
- previne uscarea produselor biologice
- contribuie la protecția personalului care manipulează
- prevenirea formării unui biofilm
- reduce încărcătura microbiană inițială
- contribuie la protecția mediului împotriva contaminării
- elimina murdăria, îndeosebi materiile organice

În cazul în care există truse neconforme ,se vor returna secției de la care provin în vederea remedierii problemei aparute .

Neconformitățile vor fi notate în Registrul de refuzuri.

Materialele care se sterilizează vor fi împachetate în:

- cutii metalice (pentru sterilizarea cu aer cald).
- cutii metalice perforate și casolete perforate cu colier (pentru sterilizarea cu abur sub presiune).
- hârtie specială pentru împachetarea instrumentarului, sticlei,cauciuc sau materialului din textile, fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune (pungi/role hârtie plastic cu indicatori fizico chimici de temperatură)

Pungile de diferite dimensiuni, cu sau fără pliu, după ce au fost încărcate cu instrumentar sau material textil și indicator fizico chimic "integrator"trebuie sudate/lipite la capătul de acces. Sudarea se realizează cu ajutorul unui aparat special dedicat acestei operații. Se pot folosi și pungi care la capătul de acces au sistem autocolant pentru lipirea pachetului. În cutiile metalice perforate sau nu, casoletele perforate cu colier se introduce materialul de sterilizat și indicatori fizico chimici, "integratori" adecvați, pentru controlul eficacității sterilizării

Responsabilități.

Personalul sanitar din compartimentul Sterilizare împreună cu personalul CPIAAM va urmări verificarea truselor , va supraveghea și corectă condițiile de desfășurare a procesului de sterilizare .

Anexe Înscrisuri.

Nu este cazul

Motivarea elaborării.

Prevenirea și limitarea apariției infecțiilor asociate asistentei medicale din compartimentul Sterilizare .



Distribuire documentație pentru procedura privind verificarea și ambalarea truselor cu instrumentar și material moale care vor fi sterilizate

Data difuzării	Nr. ex, difuzat. Ex o se găsește la S.M.C.	Sectia/ compartimentul unde a fost difuzat	Cine a primit exemplarul.
14.11 2017	1	Sterilizare	As. MARES M.
		CPIAAM	As. PELIN C.

Tabel luare la cunostință/ instruire de către/ a personalului pentru procedura privind verificarea și ambalarea truselor cu instrumentar și material moale care vor fi sterilizate

Data. 14.11 2017

	Nume / prenume	Funcția.	Semnatura.
1	As.PASCU Adina – Gabriela	As. med.pr.	
2	As.POIANA -TARDEA Elena	As. med.pr.	
3.	As.PELIN Camelia	As. med.pr	
4.	As. BUTNARU Beatrice	As. med	

Data la care urmează să fie efectuată testarea personalului... 15.11.2017

Tabel testare personal

Data testării. 15.11.2017

Cine a efectuat testarea As.MARES Mariana

	Nume / prenume	B.	S.	Ns.	Semnatura
1	As. Pascu Adina Gabriela	X			
2	As. Poiana Tardea Elena	X			
3.	As. Pelin Camelia	X			
4.	As. Butnaru Beatrice	X			



Centralizator pentru indicatorii de monitorizare ai rezultatelor/analiza rezultatelor implementarii pentru procedura privind verificarea si ambalarea truselor cu instrumentar si material moale care vor fi sterilizate

Indicatori de monitorizare ai rezultatelor	Analiza rezultatelor implementarii			
	Analiza 1 data	Analiza 2 data	Analiza 3 data	Analiza 4 data
Indicatori de structura. Personal <i>(medici, asistente medicale, infirmiere, alte categorii de personal)</i>				
Indicatori de proces. Echipamente Materiale sanitare Materiale de curatenie Biocide				
Indicatori de rezultat . Eficienta ingrijirilor Eficienta manevrelor medicale Cresterea calitatii serviciilor medicale Cresterea calitatii serviciilor hoteliere				

